

NANOCERAM-BRIGHT FLOW

NANOCERAM-BRIGHT FLOW

текущий наногибридный композитный реставрационный материал. Оптимальная консистенция, тиксотропность обеспечивают удобство, точность и простоту применения.

ПОКАЗАНИЯ

Реставрация в рамках минимально инвазивной техники.
Реставрации передней группы зубов (III - V класса).
Реставрации дефектов V класса.
Реставрации маленьких полостей и расширенная герметизация фиссур.
Для устранения поднутрений.
В качестве основы (первый слой) при комбинированной технике реставраций I и II классов.
Ремонт композитных и керамических виниров.

СВОЙСТВА


Оптимальная консистенция для удобного внесения.
Низкая усадка. Очень хорошая краевая адаптация.
Высокая износостойкость.
Превосходная эстетика.
Легко полируется.
Высокая рентгеноконтрастность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Содержание наполнителя (% по весу)	60
Средний размер частиц наполнителя (нм)	700
Прочность на изгиб (МПа)	114
Диаметральная прочность на разрыв (МПа)	51
Сорбция воды (мкг/мм ³)	15.5
Прочность на сжатие (МПа)	280

Высокая тиксотропность:

текучий при внесении, очень легко дозируется, заполняя любые, даже очень маленькие полости,
стабильный после внесения (не меняет форму без механического воздействия, не стекает даже по вертикальной поверхности, что особенно важно при реставрациях верхних зубов).

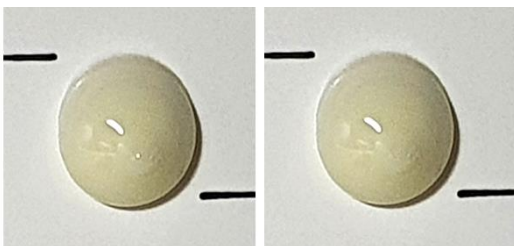

Сразу после внесения Через 40 секунд
(вертикальная поверхность)



номер по каталогу

Информация для заказа

1701123XX	Наночерам Брайт Флоу (Nanoceram-Bright Flow) шпр. 2г - 2 шт., насадка для шприца - 5 шт., инструкция по применению.
1701124XX	Наночерам Брайт Флоу (Nanoceram-Bright Flow) шпр. 2г - 1 шт., насадка для шприца - 3 шт., инструкция по применению.
01	A1
02	A2
03	A3
05	A3.5
06	A4
07	B1
08	B2
04	Opaque A2
24	Bleach Extra

В конце каталожного номера вместо «XX» указывается цифровой код, соответствующий цвету